


# B3 WiFi可视内窥镜

使用说明书 V1.0

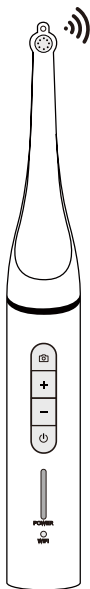


请您仔细阅读本说明书, 并正确使用

## 产品介绍

### ●主体

#### 各部件及功能介绍

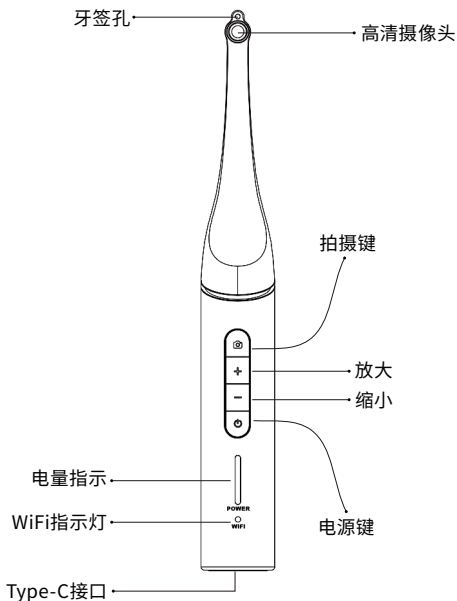

手册中的图片仅供参考, 请以实际产品为准

## ● 各部件功能及使用说明

- **牙签孔**：可装牙签剔牙。
- **高清摄像头**：可切换白色和紫光两种模式。
- **拍摄键**：短按此键为拍照，长按此键为录像开始/结束。
- **放大**：点击可放大画面。（画面太小时使用）
- **缩小**：点击可缩小画面。（画面太大时使用）
- **电源键**：长按此键2-3秒，设备开机/关机；短按此键可切换白光/紫光两种模式。
- **电量指示**：电池电量指示。
- **WiFi指示灯**：打开 WiFi 后工作指示灯以1秒/次的频率闪烁，连上 wifi 后指示灯常亮。
- **Type-C接口**：用于USB充电。（在充电过程中不能开机使用）

## 如何在移动端(手机/平板)使用设备

### ● 移动端APP如何下载

使用手机浏览器扫一扫手册中的二维码, 点击 APP C-Chic 下载并安装即可。



(iOS/Android 下载二维码)



(APP图标)


①移动端为iOS系统, 可在 APP Store 搜索 “C-Chic” 下载。

②或者在 (手机/ 平板) 浏览器中输入以下网址进行下载:

**<https://active.clewm.net/AUtKLT>**

## ● 绑定设备

长按电源键 2-3 秒开机，打开 C-Chic APP，点击右上角的“+”选择需添加的设备“B3”，并按照提示操作跳转到WiFi连接界面，选择产品对应的WiFi名称“wifi\_B3\_xxxx” (热点无加密) 显示已连接后，返回APP即可。

- ① 点击“+”添加设备，或者点击  
图标  添加智能设备




\*若APP连接设备WiFi热点后，手机系统提示当前WIFI不可上网等提示语，请选择保持手机与当前设备WiFi热点继续连接的选项。

## ● APP浏览界面功能介绍

连接成功后返回APP, 即可在APP预览界面中看到产品摄像头实时传输图像画面;

\*短按电源键, 可切换紫光模式, 方便精准找到牙齿残留物或者蛀牙。

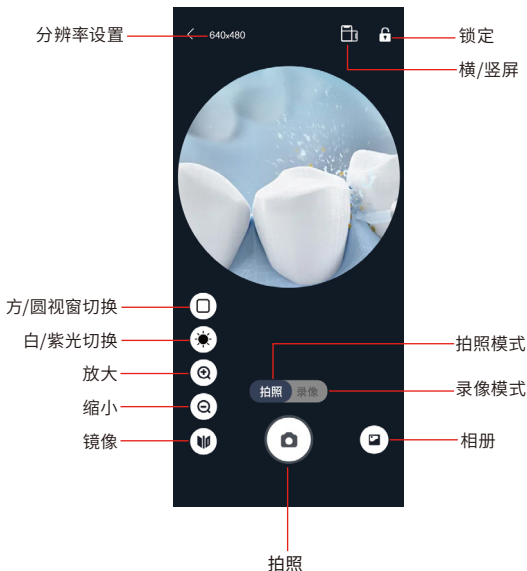

## ● APP相册界面功能介绍



注意：①图片可以一次分享多张，视频每次只能分享一个；②分享文件时需断开产品wifi连接，选用可上公网的网络。

## 产品规格

项目	参数
产品名称	WiFi可视口腔内窥镜
型号	B3
镜头光学尺寸	1/6.5"
拍照分辨率	640x480, 1280*960
录像分辨率	640x480, 1280*960
录像格式	MP4
图片格式	JPG
光源	白光, 紫外光
电池规格	1000mAh, 3.7V
功率	0.6W
工作电流	170mA
充电电压/电流	5V/1A
Wifi距离	3米内
存储环境	-20℃~+60℃ 10%~80%RH
工作环境	0℃~+50℃ 30%~85%Rh
APP工作环境	Android6.0及以上系统, iOS8.0及以上系统
WIFI执行标准	2.4Ghz ( IEEE 802.11b/g/n )



## 使用须知

- 请务必关机后清理本机器；
- 请勿使用腐蚀性的液体擦拭机身；
- 使用前后，务必清理主机，注意安全卫生，使用时也可套一次性手套；
- 用清水清理时，手柄务必套一次性手套，防止底座接口渗水，避免发生接触不良现象；
- 注意防止手柄摔碰，或用硬物撞击，以免损坏机器；
- 不使用时，要关闭电源，放置在常温常湿的环境，可以延长机器寿命。

如有疑问，请与本公司联系  
最终解释权，归本公司所有