


F1 可视吸黑头仪

快速入门指南 V1.0

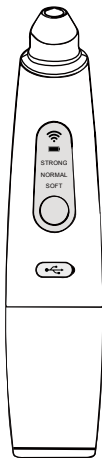


在使用前请您仔细阅读本说明书，正确使用，并妥善保管。

目录

产品介绍	3
主体	3
吸头配件	4
各部件功能及使用说明	4
更换吸头	4
APP使用	5
APP下载安装	5
绑定设备	6
产品使用方法	9
产品规格	10
使用须知	12

产品介绍

• 主体

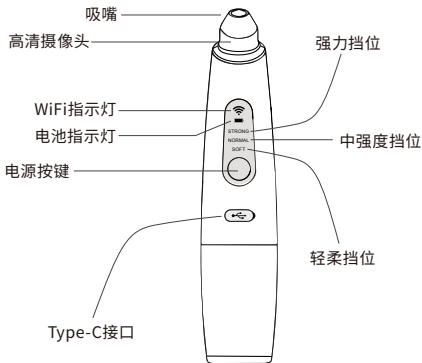

• 吸头配件



中圆头

吸力适中，适合一般黑头



大圆头

吸力大，适合顽固黑头



椭圆头

吸力强大，提拉、紧致肌肤

• 各部件功能及使用说明

吸嘴：可更换三种不同吸嘴。

高清摄像头：可切换白光和紫光两种模式。

电池指示灯：充电时指示灯亮，当电量充满时灯熄灭；当电量不足时指示灯闪烁。

轻柔档位：主要针对干性皮肤，首次使用建议使用轻柔档位。

中强性档位：主要针对混合型皮肤。


强力档位：主要针对油性皮肤。

电源按键：长按此键 2 秒开机/关机；短按此键可循环切换吸力档位。

Type-C接口：用于USB充电（在充电过程中不能开机使用）。

• 更换吸头

将原吸头取下，更换需要的吸头

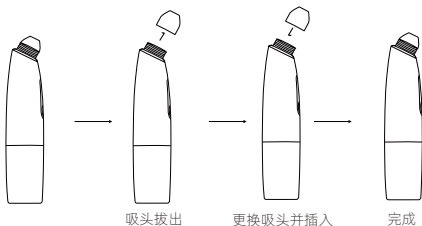

APP的使用

• APP下载安装

使用手机浏览器扫一扫手册中的二维码后，点击下载并安装即可。



适用于Android/ios系统



APP图标

可通过手机浏览器输入以下地址进行下载：

<https://active.clewm.net/FfsJv5>


• 绑定设备


第一步：产品开机进入待机状态，打开APP，选择添加设备
→选择产品对应的WiFi名称（如Wifi-F1-XXXX），并连接→
显示已连接后点击进入即可；

*若APP连接产品WiFi后，手机系统提示当前WIFI不可上网等提示
语，请选择保持当前设备与WiFi继续连接的选项。




第二步：连接成功后返回APP，即可在APP预览界面中看到产品摄像头实时传输图像画面；

*点击“图标  ”即可切换为“紫光模式”，此时黑头显示为亮光点，方便精准找到黑头；

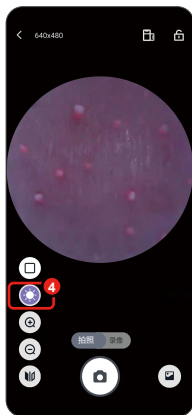

第三步：点击“拍照”、“录像”即可记录黑头的图片和视频。

*特别提醒：图片可以一次分享多张，视频每次只能分享一个；分享文件时需断开产品wifi连接，选用可上公网的网络。

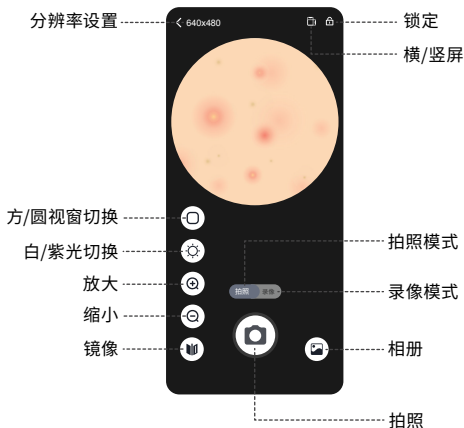

产品使用方法

使用之前，先给吸黑头仪器进行清洁消毒。

一扩

①用热水清洁皮肤，如果化妆了，需要提前把底妆卸干净。再用热毛巾在脸上湿敷五分钟，打开皮肤毛孔。



二吸

②打开吸黑头仪针对不同区域的黑头，请先选用适当的吸头 (第一次使用建议先使用小孔吸头)。

*特别提醒：在吸黑头过程中，同一位置不要停留超过3秒钟



三收

③吸完黑头之后，使用毛孔紧致液一类的化妆品进行毛孔收缩（如遇到皮肤发红请先冷敷）。吸完黑头如果不进行毛孔收缩，就会导致毛孔越来越大。



产品规格

项目	参数
产品名称	可视吸黑头仪
型号	F1
镜头光学尺寸	1/6.5"
拍照分辨率	640x480, 1280*720
录像分辨率	640x480, 1280*720

项目	参数
录像格式	MP4
图片格式	JPG
光源	白光, 紫外光
电池规格	1000mAh, 3.7V
功率	2.6W
工作电流	700mA
充电电压/电流	5V/1A
Wifi距离	3米内
存储环境	-20℃~+60℃ 10%~80%RH
工作环境	0℃~+50℃ 30%~85%Rh
WIFI执行标准	2.4Ghz (IEEE 802.11b/g/n)
APP工作环境	Android6.0及以上系统, iOS8.0及以上系统

使用须知

- * 请务必在关机后清洁本机器；
- * 请不要过度吸皮肤，否则可能导致皮肤红肿；
- * 建议产品在同一个区域的使用时间不超过3秒，每次使用时间不超过5分钟；
- * 请不要在受伤的皮肤、下巴、嘴或脆弱的地方使用，如眼角和眼睛周围；
- * 使用该产品后，您的皮肤可能会轻微变红，这是正常的，会在1小时内自然消失，如您的皮肤为敏感肤质，使用时出现严重的皮肤红肿，请立即停止使用；
- * 请放置于儿童不易触及的地方；
- * 禁止将产品长期放置在高温的环境中，长期不使用产品时，请把产品放置在常温常湿的环境存放，并每半年给产品充一次电。